


Larry[®]

kommt nach Deutschland!

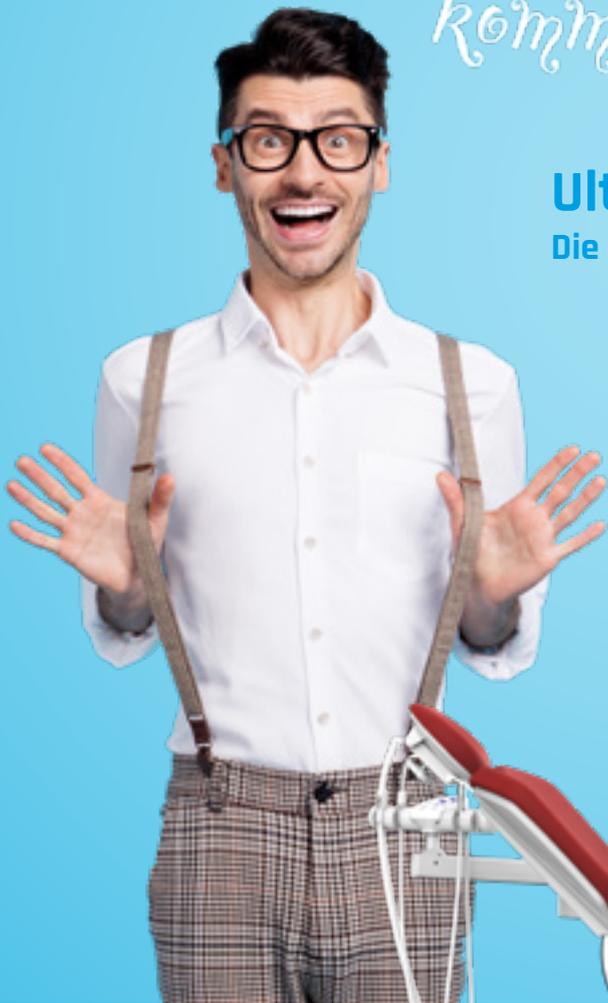

Ultimate Comfort

Die clevere Rechts/ Links Behandlungseinheit



Larry®

RITTER DENTAL
BLUE LINE

Komfort und Qualität

Die schwenkbare Einheit kann sehr einfach von Rechts- auf Linkshandbetrieb umgestellt werden.

Die Patientenliege ist synchronisiert und hat eine 30°-Bewegung für einen einfachen Zugang.

Die Einheit verfügt über ein Speichersystem

- Spülposition
- Letzte Liegenposition
- Licht an-/ ausschalten

Die Ultimate Comfort ist ausgesprochen ergonomisch und effizient für den täglichen Einsatz.

Patientenliege

- Elektrische Liegenbewegung für schnelle und leise Bewegungen
- Ergonomisches Design für bequemes Sitzen, auch bei langen Behandlungen
- Viel Beinfreiheit für den Zahnarzt
- Polsterung aus hochwertigem Leder
- Liege schwenkbar 30° links/ rechts
- 5 programmierbare Positionen, plus letzte Position und Ausstiegsposition
- Sicherheitsschalter
- Trendelenburg-Bewegung: Synchronisierte Sitz- und Rückenlehnenbewegung
- Bewegliche linke und rechte Armlehne
- Doppelgelenk-Kopfstütze



 Ritter
Made in Germany



Larry®

Rechts & Links

Mit wenigen Handgriffen von Rechts auf
Links Behandlung schwenken – einfach so.

Arztelemente

Einfache Handhabung und effiziente Behandlungen: Je nach persönlicher Vorliebe, sind zwei verschiedene Versionen erhältlich, die eine einfache Einstellung der Instrumente ermöglichen.

„S“-Version mit schwingenden Schläuchen

- Untere Trayablage
- Pneumatischer Arm-Bremsmechanismus
- Bis zu 5 Instrumente

Ausgestattet mit
2 Touchpanels!



„H“-Version mit hängenden Schläuchen

- Untere Trayablage oder optionale obere Trayablage
- Pneumatischer Arm-Bremsmechanismus
- Bis zu 5 Instrumente
- Instrumentenhalterungen mit optischen Sensoren

Bedienelement

- 2 Touchpanels mit Röntgenfilmbetrachter
- 5 programmierbare Stuhlpositionen inkl. Speiseposition, Aussteigeposition und Notfall-Position
- Abnehmbare Silikonunterlage zur einfachen Reinigung und Desinfektion („S“-Version)



RITTER DENTAL
BLUE LINE

Arbeitsleuchte

Ritter SunLite LED mit Sensor

- Lichtintensität 8.000 - 50.000 lx
- Farbtemperatur 4.200 - 6.000 K
- Einstellbare Farbtemperatur
- Einstellbare Lichtintensität
- Geringe Wärmeabgabe
- Präzise Ausleuchtung des Arbeitsfeldes



Intraorale Kamera
mit Monitor




Doppelgelenkiger Assistenzarm,
höhenverstellbar

Assistenzelement


- Integriertes Touchpanel
- Bis zu 4 Instrumente
- Großer und kleiner Saugschlauch
- 3F-Spritze Luzzani
- Doppelgelenkige und einstellbare Armbewegung



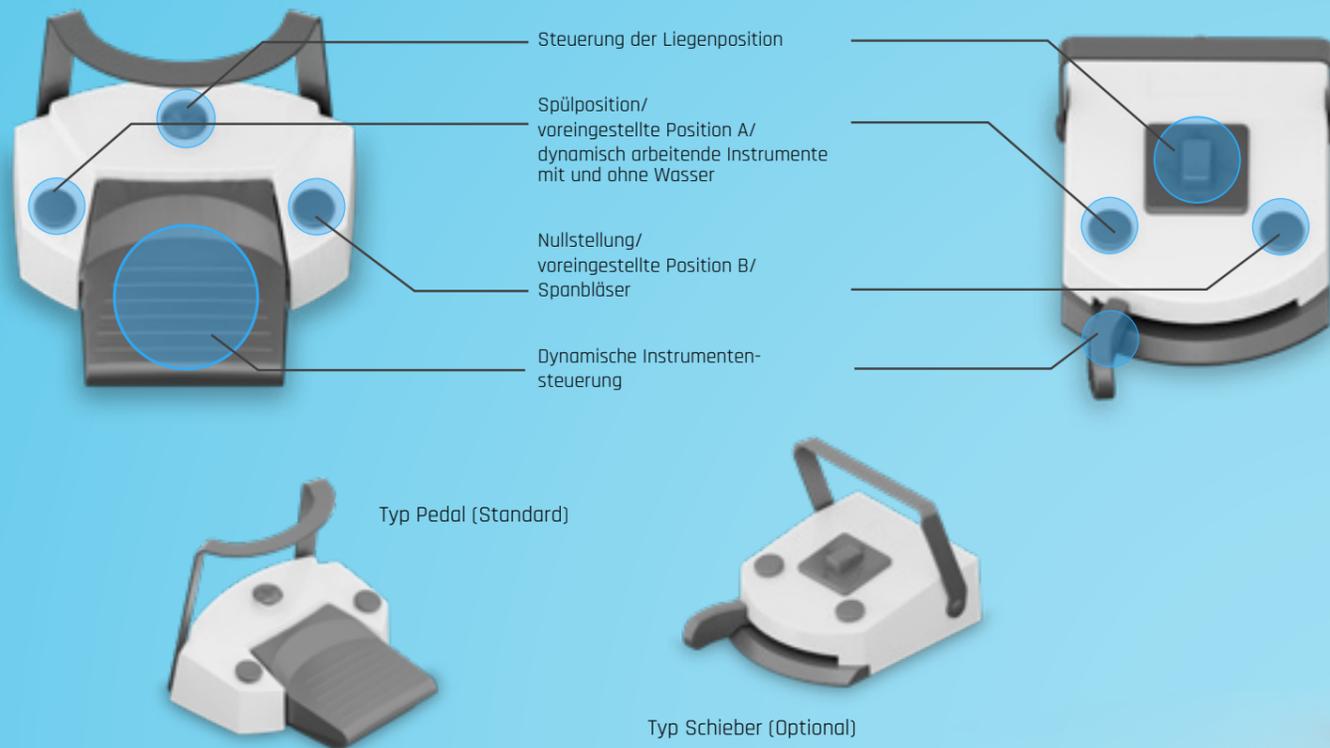

Optimale Raumnutzung

Der Ultimate Comfort ist auch sehr gut für kleinere Praxisräume geeignet, in denen nur wenig Platz vorhanden ist.

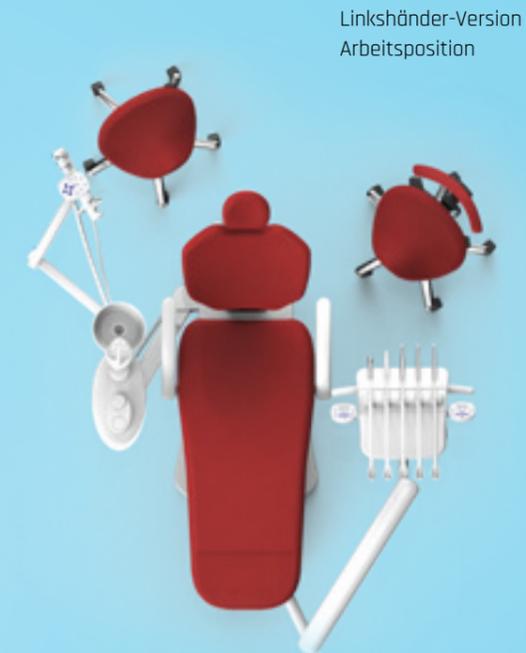

Fußanlasser

Modernes Design für Liegenbewegung und Instrumente:

- Großer Fußanlasser für einfache Repositionierung
- Manuelle Steuerung der Liegenbewegungen
- Auf/ Ab von Rückenlehne und Stuhl

Programmsteuerung der Stuhlbewegungen:


- Spei-Position/ letzte Behandlungsposition
- Frei programmierbare Liegenpositionen
- Einstiegs-/ Ausstiegsposition

Steuerung der Instrumente:

- Drehzahl-/ Leistungsregelung für das aktive Instrument
- Individueller Spraywasser Ein/ Aus-Modus für jede Instrumentenleitung

Tasten:

- Spraywasser für Instrumente
- Spanbläser

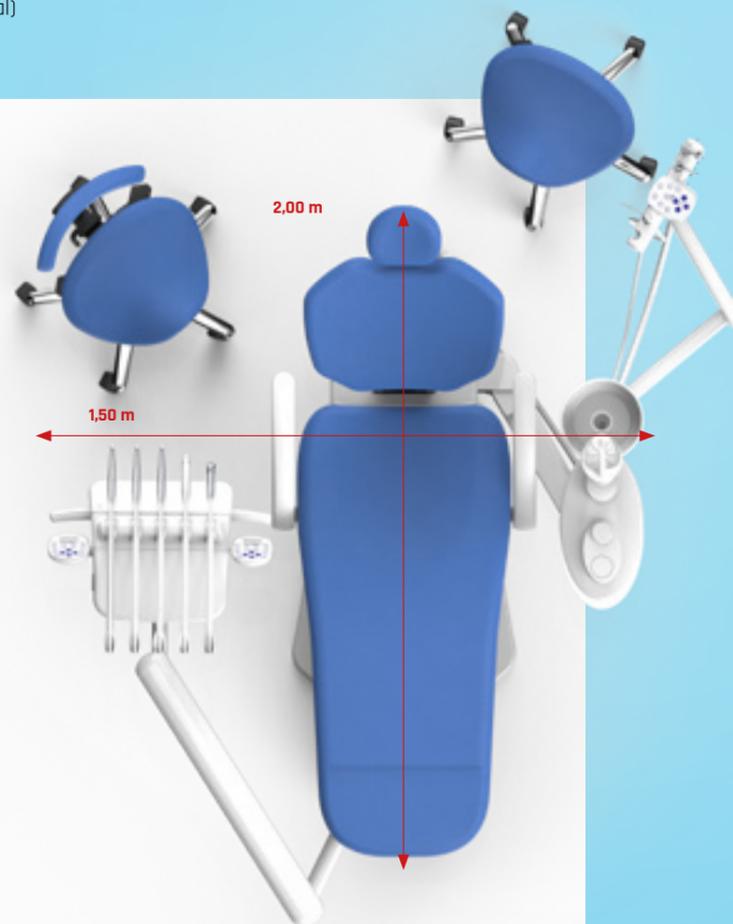




Arbeitshocker

- Rückenlehne mit fester Position oder dynamischer Bewegung
- Ergonomischer und komfortabler Sitz
- Symmetrische Rückenlehne
- Gas-Hubzylinder
- Fußkreuz verchromt
- Fünf Doppelrollen für Stabilität
- Farblich abgestimmte Polsterung, verfügbar in mehreren Farben
- Erhältlich mit oder ohne Fußring

Polsterfarben

Es stehen frische und moderne Farben zur Verfügung.

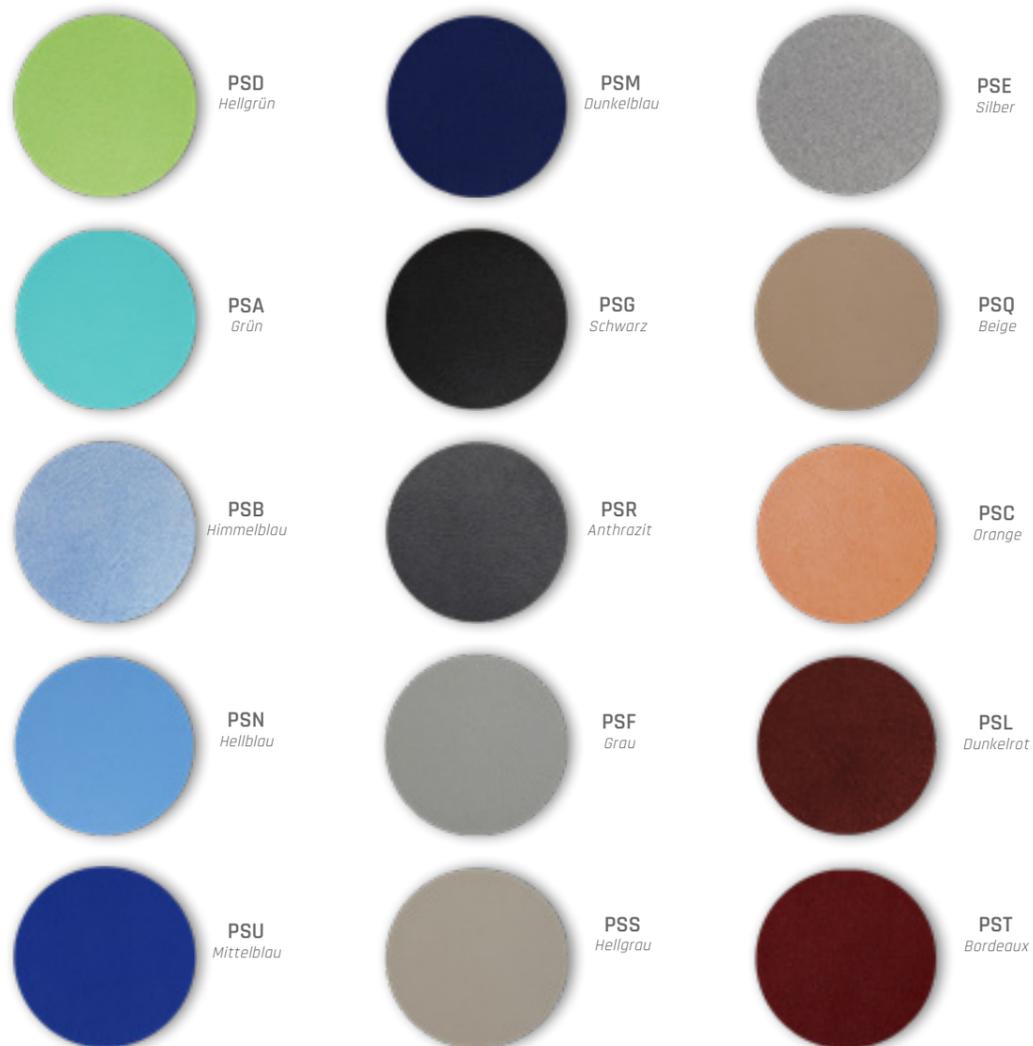

Abgebildete Muster können in Struktur und Farbe aufgrund des Druckverfahrens abweichen.

Merkmale und Optionen von "Larry®"

● STANDARD ○ OPTIONAL

Patientenliege

- Trendelenburg-Bewegung ●
- Speichern von Positionen ●
- Sicherheitsschalter ●
- Doppelgelenk-Kopfstütze, mechanisch ●
- Feste linke und bewegliche rechte Armlehne ●
- Nahtlos gepolstert ●
- Multifunktionaler Fußanlasser Typ Pedal ●
- Multifunktionaler Fußanlasser Typ Schieber ○
- 30°-Liegenbewegung ●

Arztelement

- 3-Funktionsspritze Luzzani ●
- 2 Ausgänge für Turbine und Luftmotor ●
- 2. Turbineneinrichtung mit Licht ○
- 2. Motor bürstenlos LED ○
- ZEG Ritter E oder S LED ●
- Polymerisationslicht LED ○
- Kleiner Röntgenfilmbetrachter ●
- Untere Trayablage inkl. 2 Normtrays aus Edelstahl ●
- Obere Trayablage ("S"-Version) ○

Assistenzelement

- Bedienfeld ●
- Bewegliches Assistenzelement ●
- 3-Funktionsspritze Luzzani ●
- Großer Saugschlauch ●
- Kleiner Saugschlauch ●
- Polymerisationslicht LED ○

Wassereinheit

- Schwenkbare Keramikspeischale ●
- Aqua-Bottle-System (ABS) ●
- Wasserheizung für Spülglassfüllung ●
- Vorbereitung für Nassabsaugung ●
- (mit Platzwahlventil und Wassereingangsgruppe) ○
- Mundspülbeckenventil Dürr ○
- Separierung Dürr CS1 inkl. Schwerteilesammler ○

Arbeitsleuchte

- Ritter CoolLite LED mit Sensor ●
- Ritter SunLite LED mit Sensor ○

Arbeitshocker

- MobiloFlex 60 ●
- Mobilo Flex60 mit Fußring ○

Multimedia

- Intraorale Kamera mit Monitor ○
- Vorbereitung für Monitor ○







Optionen



CoolLite Leuchte (optional)

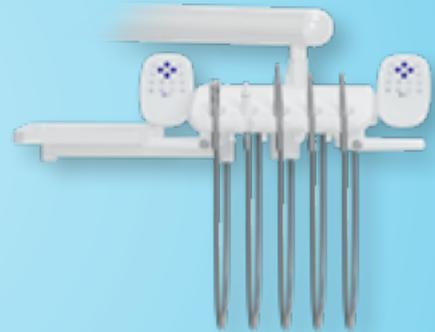

Untere Ablage (Standard)

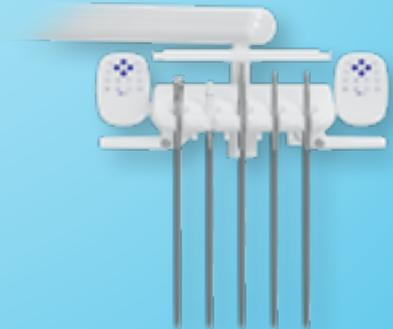

Obere Trayablage für „S“-Version (optional)

Ritter Concept GmbH
Freiburger Str. 45
88400 Biberach
Germany

Fon +49 (0) 7351 / 52 925-10
Fax +49 (0) 7351 / 52 925-21

sales@ritterconcept.com
www.ritterconcept.com

Ihr Ritter-Partner:

