

TOPCARTmobil 4+ Endo



MADE IN GERMANY



Gigadent
Mobile Dental Units

TOPCARTmobil 4+ Endo

Das TOPCARTmobil 4+ Endo basiert auf unserem bewährten Gerätekonzept mit integriertem ölfreiem Kompressor und beinhaltet grundsätzlich eine Mikro-Absaugung. Durch die flexible Bestückung bis zu acht Behandlungsinstrumenten wird das Behandlungsgerät Ihren Wünschen entsprechend aufgebaut.



Druckluft

- » Leiser, ölfreier Hochleistungskompressor aus dem Hause Dürr
- » Vibrationsarm
- » 100% Einschaltdauer
- » Kein Leistungsverlust bei längeren Präparationen

optional:

- » Druckluftanschluss am praxisinternen Druckluftsystem mit automatischer Kompressorabschaltung

Hygiene

- » 100%ige ölfreie Kühl- und Treibluft
- » ein herausnehm- und autoclavierbare Wasservorratsbehälter
- » Erfüllung der DIN EN 1717 / Wassertrennsystem
- » BIOFREE Instrumentenschläuche
- » glatte nahezu fugenfreie Gehäuseoberfläche
- » porenfreie Gehäuseabdeckung



Mikroabsaugung

- » Auffangbehälter aus Glas
- » Überfüllschutz
- » Bakterienfilter für die Abluft

MEDIswitch

- » automatische Versorgung mehrerer Instrumente mit NaCl-Lösung bei nur einer Sterilpumpe
- » kein umstecken der sterilen Schläuche

Ausstattungen

Serienausstattung:

- » individuell bestückbar mit bis zu acht Instrumenten
- » Mikro-Absaugung
- » Mikroprozessorsteuerung
- » Folientastatur mit Segmentanzeige
- » Drehzahlvorwahl
- » abnehmbare Instrumentenschläuche
- » leicht auswechselbare, außenliegende Magnetventile
- » Lichteinrichtung für alle rotierenden Instrumente
- » Instrumentenselektion über Lichtschranken
- » Externer Luftanschluss für Beistellgeräte
- » 230 V Steckdosen für Beistellgeräte
- » zwei herausnehm- und autoclavierbare Wasservorratsbehälter
- » durchgehende poren- und fugenfreie Abdeckung aus Mineralwerkstoff
- » Sensor Fußanlasser

Instrumentenbestückungen:

Funktionsspritzen wahlweise:

- » 3-Wege Funktionsspritze Gigadent
- » 1-Weg Funktionsspritze mit regelbarer Luft Gigadent
- » 6-Wege Funktionsspritze Mini Light Luzzani
- » Turbinenanschluss LUX

Mikromotoren:

- » MC 3 LK Mikromotor 1.000 - 40.000 rpm

Zahnsteinentfernungsgeräte von W&H wahlweise:

- » PC-1.0 mit Handstück für EMS-Spitzenansätze
- » PC-2 E LED mit Handstück für EMS-Spitzenansätze
- » PC-1.0 S mit Handstück für Satelec-Spitzenansätze
- » PC-2 S LED mit Handstück für Satelec-Spitzenansätze

Optionen:

- » Sterilpumpe
- » MEDIs witch
- » autoclavierbare Instrumentenköcher
- » externer Druckluftanschluss mit automatischer Kompressorabschaltung bei Versorgung über den zentralen Praxiskompressor
- » zusätzliche Edelstahlablage
- » große Fahrrollen (für die stehende Behandlung)
- » Anlaufrollen
- » Ablage für Fußanlasser


Farbgestaltung:

Die Gehäuseabdeckungen sind in den rechts gezeigten Standardfarben erhältlich.
(Alle weiteren Farben aus den Corian- oder HI-MACS Kollektionen sind gegen Aufpreis lieferbar).
Die Gehäuse werden wahlweise in RAL 9016 oder silber metallic ausgeführt.

Technische Daten:

Netzspannung:	220-230V / 50-60Hz
Luftfördermenge l/min bei 4,5 bar:	45
Betriebsdruck in bar:	6,5-8,5
Schalldruck dB(A):	48
Wasservorratsbehälter in l:	2 x 2,3
Einschaltdauer:	100%
Abmessung bis 7 Instrumente / bei 8 Instrumenten in cm h/b/t:	81,5 x 45 x 63 / 81,5 x 51 x 63

Corian - Standardfarben

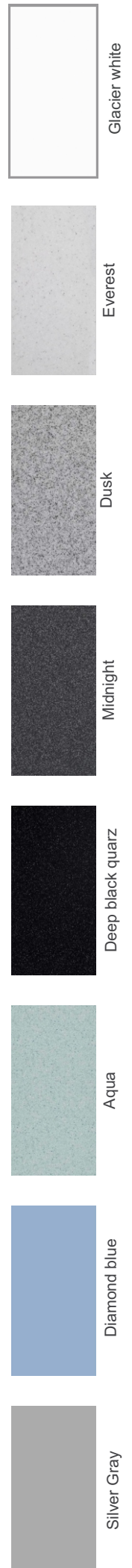



Gigadent Deutsche Dental GmbH

Bleichstrasse 5
D-65830 Kriftel
www.gigadent.de
info@gigadent.de

Telefon: + 49 (0) 61 92 - 92 82 47 0
Fax: + 49 (0) 61 92 - 92 82 47 1

MADE IN GERMANY



Änderungen vorbehalten
Ausgabe 2016
© Gigadent Deutsche Dental GmbH