



Sicher, einfach, flexibel.



Hält, was es verspricht.
Heute und morgen.

implan^{it}med

Für ein stabiles Implantat



»Die Kombination aus Implantmed und Osstell ISQ module gibt mir und meinen Patienten mehr Sicherheit in der Behandlung. Eine wichtige Entscheidungshilfe für offene Einheilung, Sofortbelastung und Versorgung.«

Dr. Fred Bergmann
Oralchirurg, Deutschland



Stressfreie Einheilung
Die maschinelle Gewindeschneidefunktion unterstützt Sie beim Setzen von Implantaten bei hartem Knochen. Eine Kompression auf den Knochen wird vermieden.




Sicheres Eindrehen
Für die nötige Sicherheit sorgt die automatische Drehmomentkontrolle, die sich von 5 bis 80 Ncm einstellen lässt.



Messbare Stabilität
Mit dem als Zubehör erhältlichen W&H Osstell ISQ module ist eine gesicherte Bewertung der Implantatstabilität möglich.



Der gemessene Implant Stability Quotient ist dank zahlreicher klinischer Studien belegt.

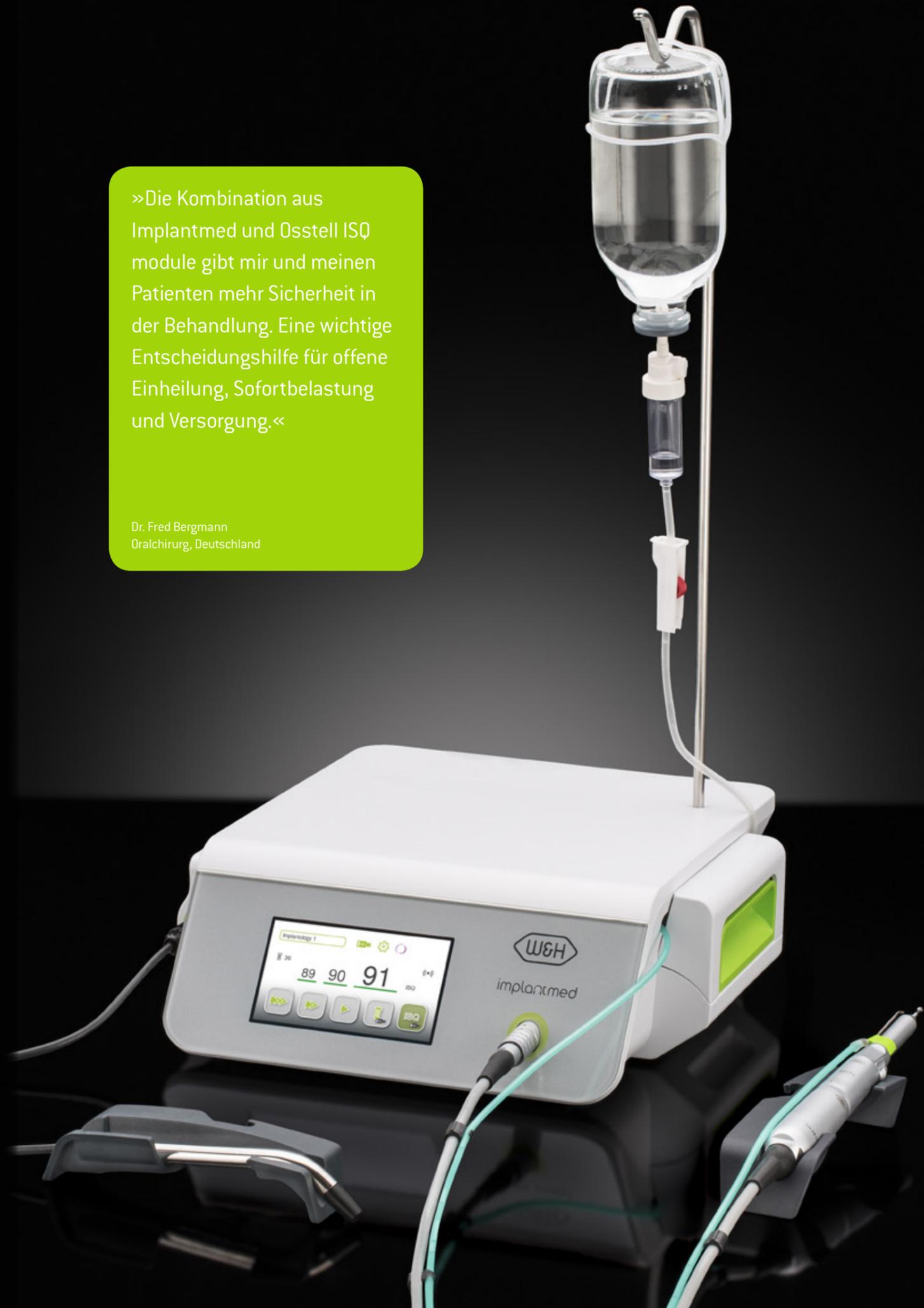

Für einen einfachen Arbeitsablauf

Implantmed beeindruckt mit seinem intuitiven Bedienkonzept und erleichtert Ihren Behandlungsablauf.


Implantmed mit neu konzipierter Pumpe!



Mit intuitiver Leichtigkeit
 Farb-Touchscreen mit benutzerfreundlicher Menüführung und Glasoberfläche zur einfachen Reinigung.



Konzentration auf das Wesentliche
 Während der Behandlung werden am Display die wichtigsten Funktionen angezeigt.

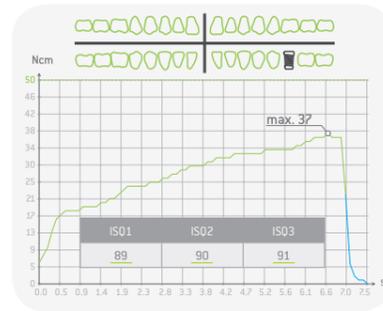

Osseointegration dokumentieren
 Mit der Dokumentationsfunktion speichern Sie bequem alle Werte der Implantatinserterion auf einem USB-Stick.

leicht zu bedienen!



Für die Assistenz
 Die neu konzipierte Pumpe ermöglicht das sichere und schnelle Einlegen des Kühlmittelschlauchs.



Fit für die Gemeinschaftspraxis
 Personalisieren Sie Implantmed für mehrere Chirurgen im Praxisverbund.

»Die Pumpe von W&H Implantmed ist auch unter sterilen Bedingungen kinderleicht zu bedienen.«

Diana Beckenbach,
 Oralchirurgische Fachassistentin,
 Deutschland

Die neuen chirurgischen Hand- und Winkelstücke mit Mini-LED+

WS-75 L | 20:1

Speziell für die Implantatbettauflbereitung und Implantatinserion entwickelt.

S-11 L | 1:1

Die erste Wahl bei der Wurzelspitzenresektion, Osteotomien, Sequestrotomien, Knochenmodellierung und Knochenglättung sowie für Weisheitszahnentfernung.

WS-91 L | 1:2,7
45°-Kopf

Speziell für den besseren Zugang im prämolaren und molaren Bereich entwickelt.

WS-56 L | 1:1

WS-92 L | 1:2,7

Entwickelt für Osteotomien, Sequestrotomien, Germektomien, Hemisektion.



Egal ob Implantatinserion oder Weisheitszahnentfernung: Optimale Kühlung und Ausleuchtung der Behandlungsstelle. Hochwertiger Edelstahl mit einer kratzfesten Beschichtung macht die chirurgischen Hand- und Winkelstücke robust und besonders langlebig.



Ermüdungsfreies Arbeiten


Die Kombination mit dem ultrakurzen Elektromotor EM-19 sorgt für langes ermüdungsfreies Arbeiten.

»Hochwertige Ausführung für Qualität und Balance. Das erstklassige LED-Licht setzt neue Maßstäbe.«

Nicholas Claydon BDS MscD PhD
MJDF RCS [eEng] FHEA,
Oralchirurg, Großbritannien

Flexibel und ergonomisch

Kabellose Fußsteuerung zum Steuern mehrerer W&H Geräte, wie Implantmed und Piezomed.

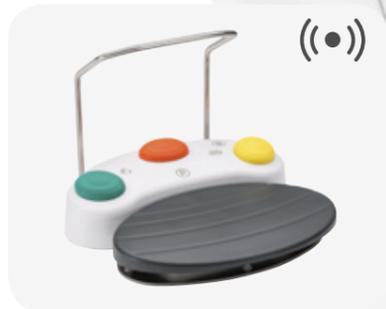

Absolute Bewegungsfreiheit

Mit der kabellosen Fußsteuerung können Sie den optimalen Standort im Arbeitsbereich frei wählen. Das bedeutet hohe Sicherheit im Behandlungsareal.



Eine für Alle

Steuern Sie die Funktionen von Implantmed und Piezomed mit nur einer Fußsteuerung.

»Unglaublich einfache Anwendung mit Implantmed und Piezomed.«

Prof. Dr. José Luis Calvo Guirado D.D.S., PhD, Eu PhD, M.S.,
Oralchirurg, Spanien

3 Schritte zu Ihrem Implantmed Jederzeit upgraden – für heute und morgen

Antrieb mit W&H Anschluss	EM-19 (ohne LED+)	EM-19 LC (mit LED+)
Insertion aller Implantate bis 80 Ncm	✓	✓
Ergonomische Balance	✓	✓
Optimale Ausleuchtung bei allen Arbeitsschritten	–	✓



Fußsteuerung	S-N2 (mit Kabel)	S-NW (kabellos)
Steriles Arbeiten	✓	✓
Wasserdicht, AP-geprüft	✓	✓
Kombinierbar mit Piezomed	–	✓
Absolute Bewegungsfreiheit	–	✓



W&H Osstell ISQ module	ohne ISQ module	mit ISQ module
Primärstabilität prüfen	✓	✓
Osseointegration beobachten	–	✓
Ncm und ISQ dokumentieren	–	✓



W&H Osstell
ISQ module
verfügbar ab
Januar 2017



Die Lösung für Ihren Implantationsworkflow



W&H Zubehör

Jedes einzelne Implantmed steht für höchste Qualität, Genauigkeit und Sicherheit. Mit perfekt aufeinander abgestimmten Zubehörteilen ergänzen Sie Ihr hochwertiges W&H Produkt.



Kühlmittelschlauch

- > Passgenau
- > Zeitersparnis für Ihre Assistenz
- > Sicherheit für Ihr Implantmed



Gerätecart

- > Ihre W&H Steuergeräte kompakt an einem Ort
- > Platzsparend
- > Mobil



Transportkoffer

- > Sicher verpackt für unterwegs
- > Platz für Implantmed, Fußsteuerung, W&H Osstell ISQ module, Hand- und Winkelstücke
- > Auch für Piezomed erhältlich

Technische Daten

QR-Code mit dem
Mobiltelefon scannen
und mehr über
Implantmed erfahren



Abb. Symbolfotos. Zusatz-Ausstattung und Inhalt der
gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.



0297

Typ:	Implantmed SI-1023
Netzspannung:	230 V
Zulässige Spannungsschwankung:	220 – 240 V
Nennstrom:	0,3 – 0,8 A
Frequenz:	50 – 60 Hz
Netzsicherung (2 pcs):	250 V – T1,6AH
Maximale Leistungsaufnahme:	170 VA
Maximale Leistungsabgabe:	80 W
Maximales Drehmoment am Motor:	6,2 Ncm
Drehzahlbereich am Motor im Nennspannungsbereich:	200 – 40.000 min ⁻¹
Kühlmitteldurchflussmenge bei 100 %:	mindestens 90 ml/min
Maße in mm (Höhe x Breite x Tiefe):	100 x 262 x 291
Gewicht in kg:	3,5
Fußsteuerung:	S-N2 / S-NW
Hand- und Winkelstücke mit Mini-LED+:	S-11 L / WS-56 L, WS-75 L, WS-91 L, WS-92 L
Garantie:	24 Monate

Made in
AUSTRIA



Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen, Deutschland
t + 49 8682 8967-0
f + 49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-239
f + 43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com