


Exaflex 6126

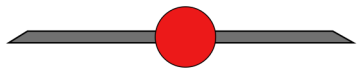


Operationstisch
Operating Table
Table d'Opération

Technische Daten


Abmessungen	
Gewicht – mit Kopf- und Beinplatte(n)	103 kg
Höhe max.	900 mm
Höhe min.	600 mm
Hub	300 mm
Breite über Geräteschienen	500 mm
Tischbreite	450 mm
Länge	gesamt 1990 mm
	Rückenplatte 500 mm
	Sitzplatte 500 mm
	Beinplatte 470 mm
Geräteschienen	25 x 10 mm
Netzspannung 230V / 50 Hz	
Steuerspannung am Fußschalter gem. IEC 601-1 24 V	
Potentialausgleichsstecker nach DIN 42801	
Max. Patientengewicht	135 kg
Verstellmöglichkeiten	
Trendelenburg	20°
Rückenplatte, heben	90°
Rückenplatte, senken	10°
Beinplatte, heben	4°
Beinplatte, senken	90°
Verpackung	
Maße	
Länge	1200 mm
Breite	800 mm
Höhe	1000 mm
Gewicht Brutto	ca. 125 kg

Technical data


Dimensions	
Weight – including head- and legplate(s)	103 kg
Max. Height	900 mm
Min. Height	600 mm
Stroke	300 mm
Width from sliderail to sliderail	500 mm
Width of table	450 mm
Length	total 1990 mm
	back plate 500 mm
	seat plate 500 mm
	leg plate 470 mm
Unit rails	25 x 10 mm
Mains voltage 230V / 50 Hz	
Control voltage of the foot switch acc. to IEC 601-1 24 V	
Potential compensation plug acc. to DIN 42801	
Max. patient weight	135 kg
Possibilities of adjustment	
Trendelenburg	20°
Back plate, ascend	90°
Back plate, descend	10°
Leg plate, ascend	4°
Leg plate, descend	90°
Packing	
Measurements	
length	1200 mm
width	800 mm
height	1000 mm
Weight gross	ca. 125 kg

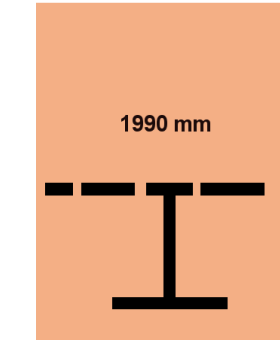


Tischplattenlänge
Tabletop length
Longuer de la table

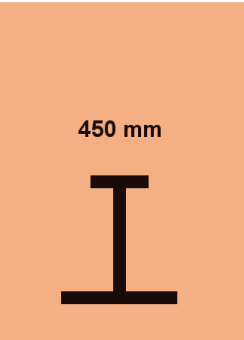


Tischplattenbreite
Tabletop width
Largeur de la table

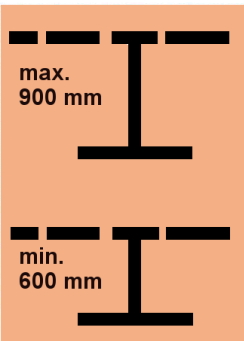


Höhenverstellung
Height adjustment
Montée/descente du plateau

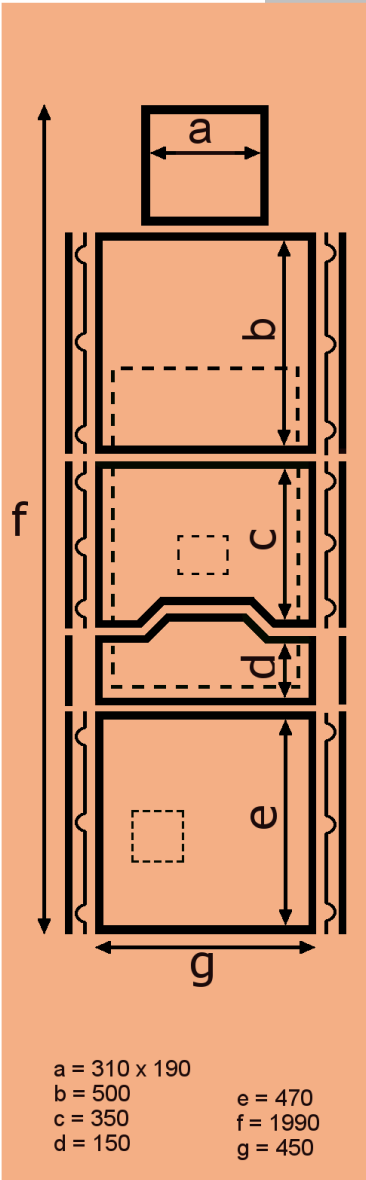


a = 310 x 190
b = 500
c = 350
d = 150
e = 470
f = 1990
g = 450

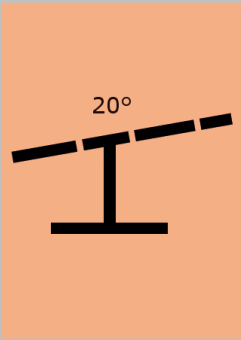

Trendelenburgposition
Trendelenburg position
Position Trendelenburg

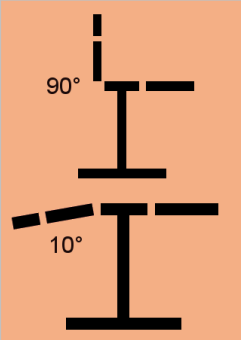

Rückenplattenverstellung
Back plate adjustment
Réglages section dorsale

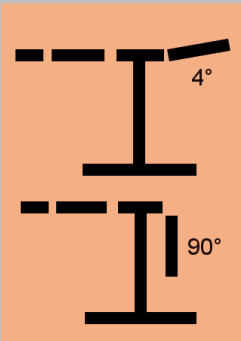

Beinplattenverstellung
Leg plate adjustment
Réglages jambières

Exaflex 6126




Operationstisch
Operating Table
Table d'Opération



jörg&sohn
GmbH
Lindenstraße 24
DE-96482 Ahorn-Schorkendorf
fon +49 (0) 95 61 / 82 99 0
fax +49 (0) 95 61 / 82 99 37
info@joergundsohn.de
www.joergundsohn.de

jörg&sohn

Exaflex 6126

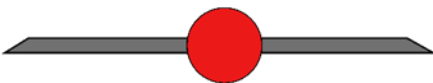

Operationstisch Operating Table Table d`Opération

Operationstisch

Kompakter Universal-Behandlungsstuhl bzw. Untersuchungstisch, der z. B. für Kieferchirurgie, HNO, Ophthalmologie, Gynäkologie, Dermatologie, Urologie, Kleinchirurgie usw. einsetzbar ist.

- ◆ Große Grundplatte 700 x 500 mm mit Edelstahlverkleidung
- ◆ Sitz (2-teilig), Rücken und Fußteil aus Aluminiumguss
- ◆ seitlich am Sitz-, Rückenteil und Fußteil standardmäßig Geräteschienen aus Edelstahl
- ◆ Einfachkopfstütze ausziehbar
- ◆ Metallteile pulverbeschichtet RAL 9007
- ◆ Polsterung lt. unseren Musterkarten (Antistatischer Bezug gegen Aufpreis)

Gynoausführung

- ◆ ohne Fußteil und Sitzverlängerung (Preisabzug)
- ◆ Auffangschale
- ◆ Beinhalter mit Kloben

Verstellmöglichkeiten

- ◆ Höhenverstellung 60 cm - 90 cm durch elektromechanisches Hubgerät mit Edelstahlverkleidung, mittels Flachfußschalter
- ◆ Trendelenburgverstellung 20°, durch Gasfedersteuerung
- ◆ Rückenverstellung +90° bis -10° durch Gasfeder
- ◆ Fußteilverstellung +4° bis -90° durch Gasfeder
- ◆ Gesamtes Fußteil nach Lockern von 2 Handrädern abnehmbar (Gynoausführung)
- ◆ Kopfstütze 20 cm ausziehbar (Handradklemmung)

Zubehör

Operating Table

Compact universal treatment chair or examination table to be used for maxillofacial surgery, ENT, ophthalmology, gynaecology, dermatology, urology, microsurgery and other medical departments

large base plate 700 x 500 mm with stainless steel cover
seat (2-part), backrest and footrest made of cast aluminium
stainless steel rails laterally on seat, back rest and footrest
easily extendable headrest
metal components powder-coated RAL 9007
upholstery as per our sample cards (anti-static upholstery subject to a surcharge)

Version for gynaecology

- ◆ without footrest and seat extension (price deduction)
- ◆ drip tray
- ◆ leg holders with clamps

Adjustment Options

- ◆ height adjustment 60 - 90 cm using an electro-mechanical lever with stainless steel cover, controlled by foot pedal
- ◆ Trendelenburg positioning 20° using gas spring control
- ◆ back rest adjustment +90° to -10° using gas spring control
- ◆ footrest adjustment +4° to -90° using gas spring control
- ◆ complete footrest with removable seat extension by loosening the 2 knobs (gynaecology model)
- ◆ headrest extensible by 20 cm (clamping mechanism)

Accessories

For the different medical ranges: Please see extra leaflet

Subject to technical modifications!



Table d`Opération

Table de traitement universel ou table d'examen adaptée aux domaines de la chirurgie maxillo-faciale, ORL, ophtalmologie, gynécologie, dermatologie, urologie, microchirurgie etc.

- ◆ Grande plaque de base 700 x 500 mm avec capot en acier inoxydable
- ◆ Assise en deux parties, dossier et repose-pied en fonte d'aluminium
- ◆ Rails inox (25 x 10 mm) latéraux de l'assise, dossier et repose-pieds
- ◆ Tête simple extensible
- ◆ Pièces métalliques peintes par poudrage RAL 9007
- ◆ Rembourrage selon nos échantillons (supplément pour rembourrage antistatique)

Version gynécologie

- ◆ sans repose-pied ni rallonge assise (déduction)
- ◆ bac en inox
- ◆ jeu de deux repose-jambes avec chapes

Possibilités de réglage

- ◆ Réglage en hauteur 60 à 90 cm par élévateur électromécanique avec capot en acier inox, à l'aide d'un interrupteur à pied
- ◆ Position Trendelenburg 20° commandé par ressort à gaz
- ◆ Réglage du dossier +90° à -10° commandé par ressort à gaz
- ◆ Réglage du repose-pied +4° à -90° commandé par ressort à gaz
- ◆ Repose-pied entier et rallonge de l'assise amovible par le desserrage de 2 volants manuels (version gynécologie)
- ◆ Tête extensible sur 20 cm (mécanisme de serrage)

Accessoires

Pour les différents domaines médicaux: prière voir documentation séparée

Sous réserves de modifications techniques!

