

TOPCARTmobil 4/4+ Endo

Plug
and
work



MADE IN GERMANY



GD **GigaDent**
Mobile Dental Units

TOPCARTmobil 4/4+ Endo


Mit der Geräteserie TOPCARTmobil 4 bzw. 4+ Endo setzen wir Maßstäbe in kompromissloser Funktionalität, überzeugender Grundausstattung und schlichtem Design. Ausgereifte Technik zusammen mit robuster Bauweise garantieren die Langlebigkeit unserer Behandlungsgeräte. Durch die Modultechnik wird das Behandlungsgerät nach Kundenwunsch aufgebaut.

Druckluftversorgung

Im Gegensatz zum TOPCARTmobil 4 Endo, das am zentralen Druckluftsystem der Praxis angeschlossen werden muss, ist beim TOPCARTmobil 4+ Endo ein leistungsstarker Kompressor zur Druckluftherzeugung integriert. Daher ist die Ausführung TOPCARTmobik 4+ Endo noch flexibler.

Hygiene

- Autoclavierbarer Wasservorratsbehälter
- Erfüllung der DIN EN 1717 / Trinkwasserverordnung
- Instrumentenspülsystem
- Autoclavierbare Instrumentenköcher
- BIOFREE Instrumentenschläuche
- Glatte nahezu fugenfreie Gehäuseoberfläche
- Porenfreie Gehäuseabdeckung mit Folientastatur
- Einfache Reinigung und Desinfektion

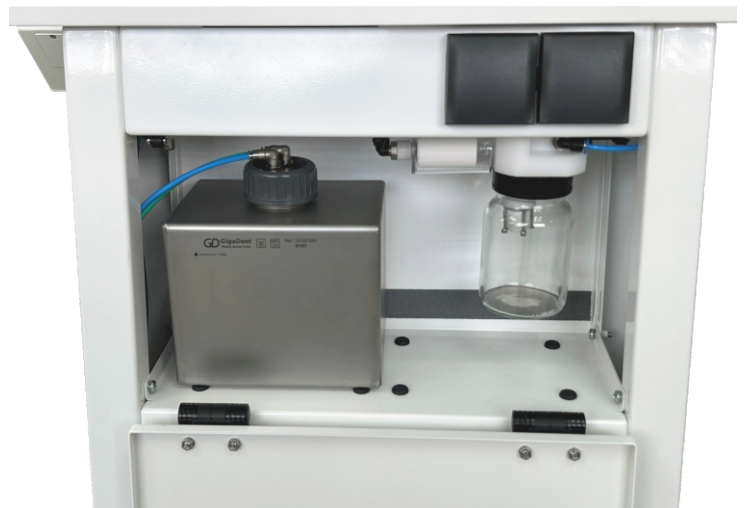

Mikroabsaugung

- Autoclavierbares Handstück für Luer-Kanülen
- Autoclavierbarer Auffangbehälter aus Glas
- Überfüllschutz
- Hydrophober Bakterienfilter für die Abluft

Optionale OPTIMA Steuereinheit

- Zur optimalen Steuerung der MCX und MX-2 Mikromotoren
- Bei Verwendung von MX-2 ist die Endo-Funktion integriert
- Editierbare Speicherplätze



Grundausrüstung

	4	4+
• Individuell bestückbar bis zu acht Instrumente	✓	✓
• Corian-Abdeckung	✓	✓
• Folientastatur mit Segmentanzeige	✓	✓
• Mikroprozessorsteuerung	✓	✓
• Drehzahlvorwahl	✓	✓
• Abnehmbare Instrumentenschläuche	✓	✓
• Leicht auswechselbare, außenliegende Magnetventile	✓	✓
• Mikroabsaugung	✓	✓
• Lichteinrichtung für alle rotierenden Instrumente	✓	✓
• Instrumentenselektion mittels Lichtschranken	✓	✓
• Integrierter Kompressor		✓
• Externer Luftanschluss für Beistellgeräte	✓	✓
• 230 V AC Steckdosen für Beistellgeräte	✓	✓
• Ein herausnehm- und autoclavierbarer Wassertank	✓	✓
• Durchgehende porenfreie Corianabdeckung	✓	✓
• Sensor Fußanlasser	✓	✓

Corian - Standardfarben



Glacier white



Deep black quartz

Instrumentenauswahl

Instrumentenauswahl		4	4+
• Gigadent 3-Wege Funktionsspritze	✓	✓	
• 1-Weg Gigadent Funktionsspritze mit manuell einstellbarer Luftmenge	✓	✓	
• 3-F Funktionsspritze DCI-Precision-Comfort	✓	✓	
• 1-F Funktionsspritze DCI Precision Comfort mit manuell einstellbarer Luftmenge	✓	✓	
• Luzzani Mini Light 6-Wege Funktionsspritze	✓	✓	
• Turbinenanschluss 4-Loch (Lux)	✓	✓	
• Turbinenanschluss LUX Einbaumodul mit manuell einstellbarer Luftmenge	✓	✓	
• Mikromotoren MC 3 LK (Bien-Air)	✓	✓	1.000 - 40.000 rpm
• Bürstenlose Mikromotoren MCX (Bien-Air)	✓	✓	1.000 - 40.000 rpm
• Bürstenlose Mikromotoren MX-2 (Bien-Air)	✓	✓	100 - 40.000 rpm
• Newtron Zahnsteinentfernungsgesetze (Acteon)	✓	✓	

Kombinierbar mit OPTIMA Int Steuergerät	OPTIMA Int Steuergerät mit Endo Funktion
✓	
✓	✓

Optionen

	4	4+
• OPTIMA Steuergerät für MCX und MX-2 Mikromotoren	✓	✓
• Automatische Kompressor-Abschaltung bei externer Druckluftzuführung über den zentralen Praxiskompressor (nur für 4+ Behandlungsgeräte)		✓
• Sterilpumpe	✓	✓
• Große Fahrrollen	✓	✓
• Ablage für Fußanlasser	✓	✓

Farbgestaltung

Die Corina-Gehäuseabdeckungen sind in den rechts gezeigten Standardfarben erhältlich.
Die Gehäuse sind in RAL 9016 pulverbeschichtet.

Technische Daten

Netzspannung:	220-230V / 50-60Hz
Luftfördermenge l/min bei 4,5 bar:	45
Betriebsdruck in bar:	6,5-8,5
Schalldruck dB(A):	48
Wasservorratsbehälter in l:	1 x 2,3
Einschaltdauer:	100%
Abmessung bei 8 Instrumenten in cm h/b/t:	81,5 x 51 x 63



Gigadent Deutsche Dental GmbH

Bleichstrasse 5
D-65830 Kriftel
www.gigadent.de
info@gigadent.de

Telefon: + 49 (0) 61 92 - 92 82 47 0

MADE IN GERMANY



Änderungen vorbehalten
Ausgabe 2020 Rev. 1
© Gigadent Deutsche Dental GmbH